



NOELLE® S554.100

Simulador de partos materno y neonatal



NOELLE® S554.100 | Simulador de partos materno y neonatal



Simulador NOELLE® genuino
El simulador NOELLE® materno y neonatal de tamaño real con un sistema de parto de precisión para partos rápidos y repetibles, así como aquellos que duran horas.



Recién nacido con cianosis y pulso
Recién nacido a término intubable con pulso y cianosis.

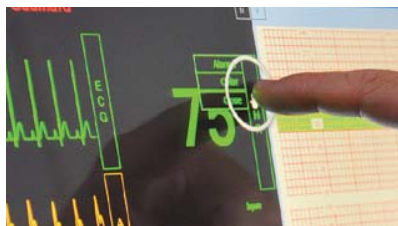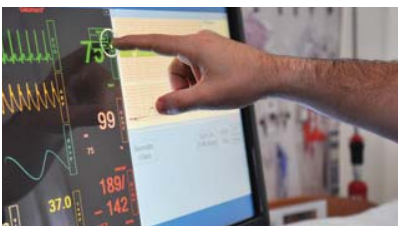

Monitor táctil de 23 pulgadas
Se comunica de forma inalámbrica con la computadora portátil. Muestra hasta 8 valores que incluyen RC, PSA, RR, CO₂, SpO₂, temperatura, PNI y tiempo.



Computadora portátil
La computadora portátil suministrada se conecta y controla a NOELLE® y su recién nacido. Las comunicaciones inalámbricas entre la computadora portátil y los monitores táctiles proporcionan signos vitales en tiempo real controlados desde la computadora portátil.

NOELLE® S554.100 | Simulador de partos materno y neonatal

Destacadas

- Prepárese para emergencias obstétricas. Evalúe y realice informes sobre resultados de formación y clínicos.
- Simulador de parto NOELLE® materno y neonatal de tamaño real con capacidad para simular eclampsia y hemorragia.
- Su tamaño pequeño y su plataforma móvil permiten la formación en unidades de Parto y Postparto.
- Desarrolle competencias de equipo y técnicas.
- Monitor de signos vitales maternos.
- Monitor de tono cardíaco fetal y signos vitales del neonato.
- Configure y gestione simulaciones obstétricas de partos normales, variaciones del parto normal, de distocia de hombro, presentación de nalgas, preeclampsia, prolapso del cordón umbilical, ruptura del útero, hemorragia periparto, síndrome anafiláctico del embarazo, nacimientos prematuros.
- Comente las mejores prácticas y analice cómo mejorarlas

Simulador NOELLE® genuino

- Vía respiratoria intubable con elevación del pecho.
- Brazos con vías intravenosas para medicamentos/líquidos.
- Cubierta del abdomen removible.
- Eclampsia programable con crisis.
- Sistema de parto de precisión.
- Fuerza y posición de hombro del feto medidas y graficadas en tiempo real.
- Hemorragia posparto programable.
- Feto para partos con placentas y cordones umbilicales.
- Pulsos radiales bilaterales.
- Habla materna.

Recién nacido con cianosis y pulso

- Recién nacido a término intubable con cianosis y pulso umbilical.
- Se miden y se registran las compresiones/ventilaciones del pecho.
- Sonidos cardíacos y pulmonares realistas.
- Llanto realista.

Monitor de signos vitales simulados

- Una gran pantalla táctil única de 23 pulgadas con controlador de escritorio y comunicación inalámbrica a la computadora portátil.
- Muestra hasta 8 parámetros vitales incluyendo RC, PSA, RR, CO₂, SpO₂, temperatura, PNI y tiempo.
- Seleccione hasta 5 ondas dinámicas incluidas la derivación II del electrocardiograma, PSA, respiración, CO₂ y oximetría del pulso.
- Monitoree los signos vitales maternos y neonatales.
- Monitor perinatal con actividad del útero programable y ritmo cardíaco del feto.

Computadora portátil

- Computadora portátil de 15 pulgadas.
- Módulo USB con conexión a NOELLE® y su recién nacido.
- Comunicaciones inalámbricas entre la computadora portátil y los monitores táctiles.

Otros

- Disponible en distintos tonos de pie. étnicos sin costo adicional.
- Funda blanda de transporte del simulador.
- Certificaciones FCC, IC, CE.
- Un año de garantía, con extensión a tres años.
- Instalación y capacitación disponibles.



NOELLE® S554.100 S554.100

Patentado; otras patentes pendientes

NOELLE® S554.100 | Simulador de partos materno y neonatal

Material del curso MOES™

- Material del curso validado para emergencias obstétricas. Para su uso con el simulador NOELLE®.

Incluye:

- Manual de situaciones de ejemplo
- DVD con videos de introducción a las situaciones de ejemplo, configuración e inicio rápido
- Código de activación para instalar las situaciones de ejemplo MOES™ en el software GIGA®



Material del curso MOES™

CD555



Grabación e informes Micro+

Camera allows instructors to record one video y audio stream y a patient monitor feed y the simulator log file.

Incluye:

- El software preinstalado de Micro+ en su computadora portátil
- Cámara con cable USB y micrófono incluido

Grabación e informes Micro+

S554.100.210
S554.100.210U

Sistema de respuesta de la audiencia Micro+

¿Ya tiene NOELLE® y el sistema Micro+?

Obtenga un Sistema de respuesta de la audiencia independiente. Los participantes y los observadores reciben controles remotos inalámbricos codificados para responder a preguntas estandarizadas.

Incluye:

- Un receptor RF
- Cinco teclados inalámbricos
- Software integrado con Micro+

Sistema de respuesta de la audiencia Micro+
S554.100.311



Visítenos en línea en www.gaumard.com

Simuladores obstétricos - NOELLE® S554.100 | 23