




Materno y neonatal

Torsos obstétricos para partos


Torsos para partos maternal y neonatal

Susie® Obstétrica Avanzada
S500.200

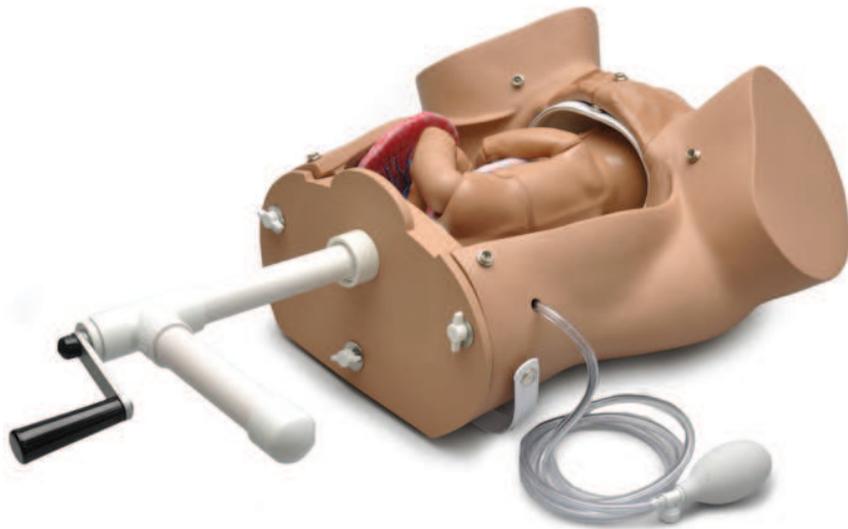

Susie® Obstétrica
S500.100

Simuladores originales de partos
Modelos originales SIMA®
S500

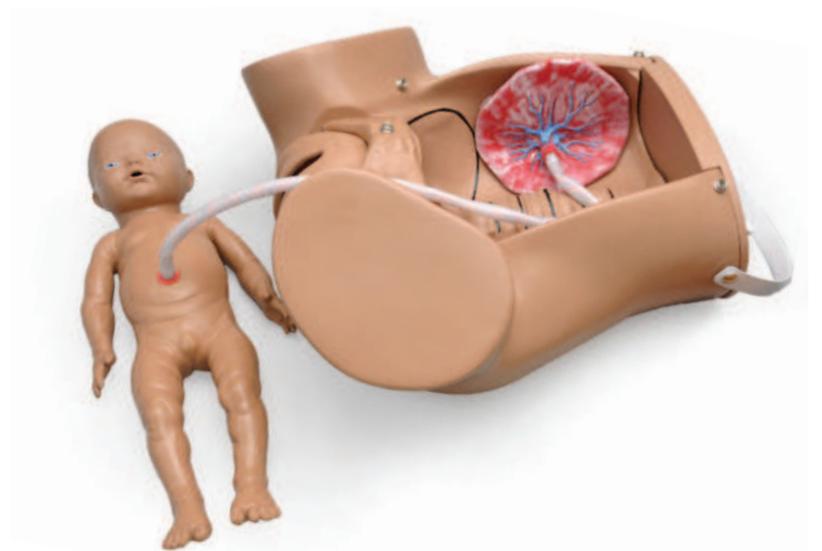



Susie® Obstétrica Avanzada

S500.200 Torso para partos versátil y ligero

- Ruidos cardíacos maternos y neonatales
- El recién nacido llora, emite gruñidos y estridor
- Partos de cabeza o de nalgas
- Partos con ventosa obstétrica o fórceps
- Accesorios de vulva reemplazables
- Dos cubiertas abdominales removibles
- Feto con cojín de elevación para la práctica de las maniobras de Leopold

Un simulador versátil que usa elementos durables probados durante años de servicio en todo el mundo

Torso para partos ligero en tonos de piel étnicos claros, medios u oscuros

- Ruidos cardíacos maternos audibles desde 0 a 200 ppm
- Ruidos cardíacos del recién nacido audibles desde 0 a 220 ppm
- El recién nacido llora, emite gruñidos y tiene estridor
- Partos de cabeza o de nalgas
- Partos asistidos con ventosa obstétrica o fórceps
- Accesorios de vulva reemplazables con cérvix altamente distensibles
- Dos cubiertas abdominales removibles: una transparente y la otra opaca
- Feto con cojín de elevación para la práctica de las maniobras de Leopold





Parto de nalgas

Practique el parto vaginal de nalgas y libere las piernas con la maniobra de Pinard.



Palpitación fetal

Palpación del feto a través de la cubierta abdominal transparente u opaca.



Parto con ventosa obstétrica

Partos asistidos con ventosa obstétrica o fórceps con o sin cubierta abdominal



Expulsión de la placenta

Ubique la placenta para simular placenta previa. La placenta tiene fragmentos desmontables.



Coloque las pinzas y corte el cordón umbilical

Incluye cuatro cordones umbilicales y dos pinzas umbilicales para ejercicios de colocación de pinzas y corte.



Sangrado posparto

Use el concentrado de sangre para simular sangrado posparto.



Cateterismo

Use un catéter vesical convencional para reducir el tamaño de la vejiga.



Masaje uterino

El masaje uterino disminuye el tamaño la capa externa del útero permitiendo al estudiante sentir la capa interna del útero, pequeña y firme



Recién nacido a término

Recién nacido a término con gorra y pulso umbilical, acepta cateterismo umbilical.



Tonos cardíacos fetales

Un estetoscopio de Pinard o convencional puede usarse para oír los ruidos cardíacos fetales que se ajustan de 0 a 220 pulsaciones por minuto.



Ritmo cardíaco, llanto y ruidos de las vías respiratorias

Seleccione los ritmos cardíacos fetales, maternas o los sonidos de llanto, gruñidos y estridor del recién nacido.

Susie® Obstétrica Avanzada | S500.200

Características

- Torso para partos ligero en tonos de piel étnicos claros, medios u oscuros
- Partos de cabeza o de nalgas
- Partos asistidos con ventosa obstétrica o fórceps
- Accesorios de vulva reemplazables con cérvix altamente distensibles
- Dos cubiertas abdominales removibles: una transparente y la otra opaca
- Ruidos cardíacos maternos audibles desde 0 a 200 ppm
- Ruidos cardíacos del recién nacido audibles desde 0 a 220 ppm
- El recién nacido llora, tiene gruñidos y tiene estridor
- Feto con cojín de elevación para la práctica de maniobras de Leopold
- El recto admite medicación

Bebé para partos con:

- Dos placentas con fragmentos removibles
- Dos cordones umbilicales
- Dos conectores
- Dos pinzas umbilicales
- Bebé para partos con fontanelas en el cráneo
- Ritmo cardíaco audible desde 0 a 220 ppm
- Piel suave del rostro que se encaja sobre la cabeza para parto por ventosa obstétrica/fórceps

Bebé recién nacido con:

Pulso umbilical que se opera con pera de goma
Gorro en la cabeza para minimizar hipotermia
Cateterismo umbilical

Otras características

Hemorragia posparto con 1,25 litros de fluidos
Controle la hemorragia posparto al masajear el útero
Cateterismo vesical con flujo urinario variable

Accesorios

- Alimentado por pilas. Cuatro pilas AA son capaces de más de 30 horas de operación
- Bata de hospital con broches
- Dos pares de guantes. No son de látex.
- Pera de goma
- Estetoscopio convencional
- Estetoscopio de Pinard
- Soporte de extracción de sangre con pera de goma para regular la presión
- Concentrado de sangre simulada

Visítenos en línea en www.gaumard.com



Seleccione el ritmo cardíaco materno y fetal o los sonidos de llanto o los ruidos de las vías respiratorias del recién nacido.



Practique partos de cabeza o de nalgas.

- Concentrado de orina simulada
- Un catéter vesical no estéril (no apto para uso humano)
- Cuatro accesorios de vulva
- Tres cérvix distensibles
- Dos placentas con fragmentos removibles
- Lubricante de silicona y polvos de talco
- Instrucciones de uso
- Bolsa de transporte y almacenamiento

Susie® Obstétrica Avanzada
S500.200

Susie® Obstétrica

Susie® Obstétrica


- Versátil
- Portátil
- Partos normales o de nalgas
- Maniobras de Leopold
- Manipulación intrauterina
- Prolapso del cordón umbilical
- Placenta previa
- Masaje fúndico
- Cuidados posparto

Características

- Partos normales o de nalgas
- Demuestre la rotación interna, la expulsión y la rotación externa
- Cojín inflable levanta el feto para las maniobras de Leopold
- Practique la manipulación intrauterina para convertir el feto de nalgas o en posición transversa en parto de cabeza
- Canal de parto adaptable para demostrar la distocia y tratar con su alivio
- 3 cérvix dilatables
- 1 feto para ejercicios de "versión"
- 1 cubierta del estómago acolchada
- 3 accesorios de vulva
- 2 placentas
- 3 cordones umbilicales
- Lubricante de silicona y polvos de talco
- Instrucciones
- Bolsa de transporte

\$500.100

Patente 6,503,087

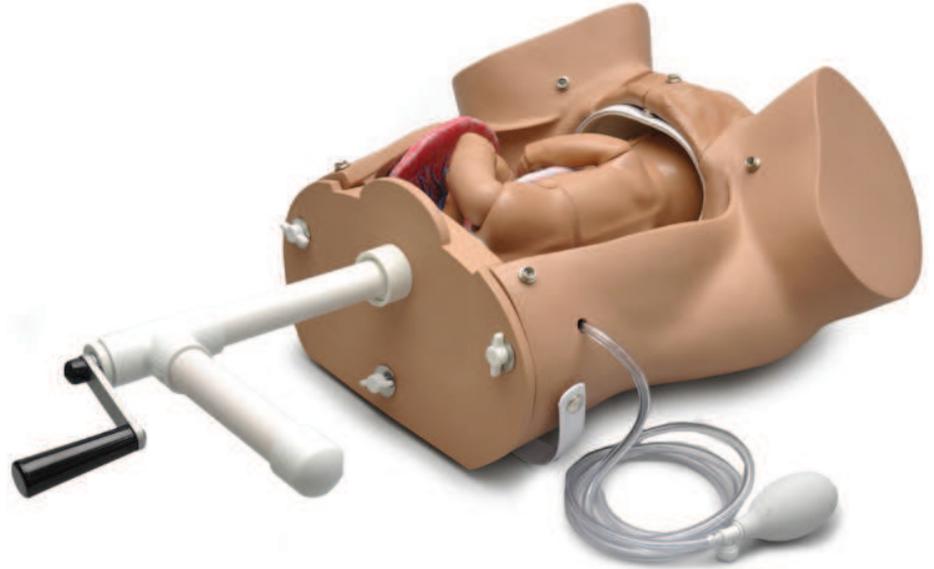

Prolapso del cordón umbilical.



Feto articulado con fontanelas, columna vertebral, hombro, codos y rodillas palpables.



Mecanismo de parto, cérvix con dilatación y feto articulado.



Placenta previa.




Mecanismo de parto, cérvix con dilatación y feto articulado.

Palpación para maniobras de Leopold

- Coloque el feto en posición de cabeza, transversa o de nalgas
- Cojín inferior que eleva el feto para la palpación
- La cubierta suave del estómago facilita la palpación o la manipulación fetal



Módulo de palpación para las maniobras de Leopold.

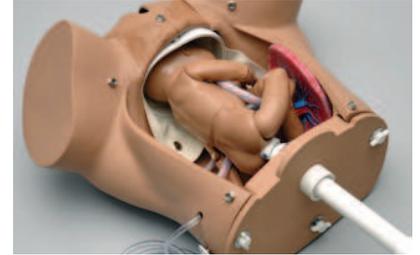

Feto articulado con fontanelas, columna vertebral, hombro, codos y rodillas palpables.

Parto vaginal normal

- Parto desde las posiciones ROA o LOP
- Demuestre la rotación/expulsión
- El cérvix dilata a medida que el parto progresa
- Ubique la placenta para simular placenta previa
- Practique la reducción del cordón nuchal



Cérvix con dilatación extensible que permite a los estudiantes realizar exámenes vaginales y registrar resultados.




Movimiento descendiente para la salida del hombro anterior.

Partos de nalgas y con ventosa

- Coloque el feto en el mecanismo de parto en la posición normal o de nalgas
- Enseñe la maniobra de Pinard de "giro de piernas" durante el parto de nalgas
- Retarde el parto normal para crear la necesidad de aceleración con ventosa obstétrica




Aceleración del parto con ventosa obstétrica.

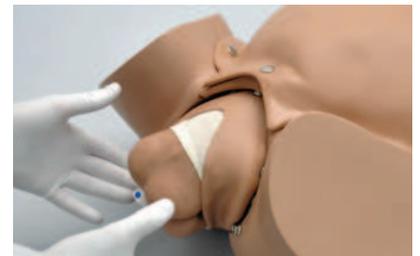

Parto de nalgas.

Actividad posparto

- Practique el masaje fúndico para reafirmar un útero "pantanoso"
- Los módulos presentan la episiotomía central con desgarros en los labios menores, desgarros mediolaterales y episiotomía mediolateral estándar

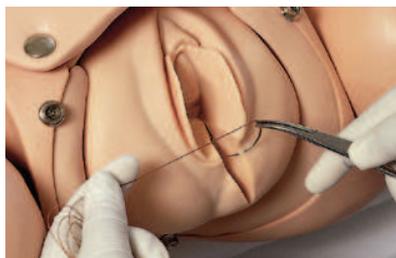


Módulos de reparación de episiotomía reutilizables.



Módulos de reparación de episiotomía reutilizables.

Torsos obstétricos para partos

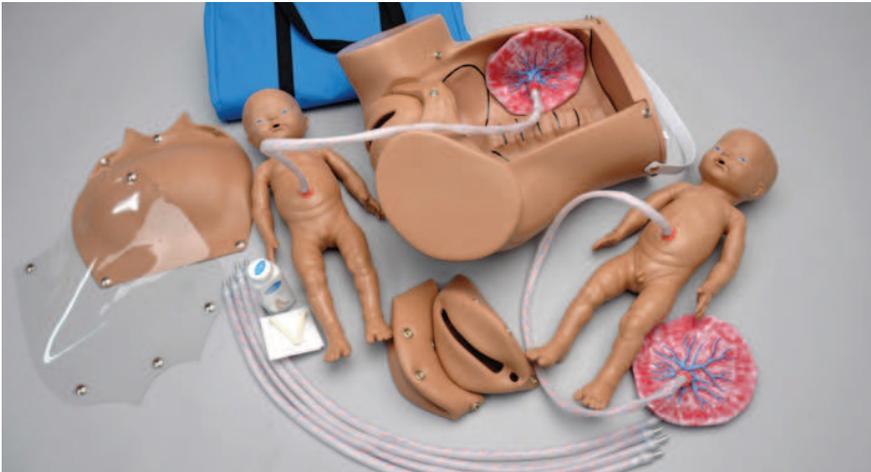

Simuladores originales de partos

... modelos SIMA® originales

Este simulador versátil de partos no solo proporciona una simulación excelente de la experiencia de parto normal para el estudiante y el educador, sino que también proporciona instrucción en partos anormales y múltiples. Puede usarse para la demostración de los siguientes procesos obstétricos:

- Parto vaginal normal
- Parto de nalgas en presentación completa, en presentación franca y en presentación podálica
- Cesárea
- Maniobra de Ritgen
- Episiotomía
- Presentación de cabeza
- Manipulación intrauterina
- Presentaciones de cabeza/cabeza, cabeza/nalgas, nalgas/cabeza, nalgas/nalgas en partos múltiples
- Prolapso del cordón umbilical
- Demostración de placenta previa: total, parcial y marginal
- Expulsión normal de cordón umbilical y placenta
- Palpación de fontanelas fetales

Características

- Placa removible del diafragma para posicionamiento manual de los fetos
- Cubierta del estómago removible para posicionamiento de los fetos
- Cavity pélvica de tamaño real con puntos de referencia anatómicos
- Contorno pintado a mano de los huesos de la pelvis
- Tres accesorios de vulva blandos para ejercicios de episiotomía
- Un bebé niño y un bebé niña, cada uno con cordón umbilical y placenta
- Columna vertebral y fontanelas anatómicamente precisas en los fetos
- Una cubierta de estómago con color piel
- Cuatro cordones umbilicales extra
- Dos pinzas umbilicales
- Polvos de talco
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte blanda

S500



Módulo de palpación para maniobras de Leopold

- Feto en una única pieza con fontanelas, columna vertebral, hombro, codos y rodillas palpables
- Se puede colocar el feto en posición de cabeza, transversa o de nalgas
- Feto acomodado entre dos "cojines"
- Los cojines pueden inflarse por separado. El inflado del cojín inferior eleva el feto a la posición deseada. El inflado del cojín superior crea un abdomen firme como el que se observa en el noveno mes del embarazo
- El módulo encaja en el modelo S500

Características

- Feto
- Cojines superior e inferior que acomodan al bebé
- Dispositivos de inflado

S500.3



Torsos obstétricos para partos

Recién nacido articulado Susie® para maniobras de Leopold

Características

- Simulador de 19 partes incluyendo cabeza, cuello, hombros, codos, caderas y rodillas articulados
- Boca y orificios nasales realistas para aspiración simulada
- Fontanelas, columna vertebral, hombro, glúteos, codos y rodillas palpables
- Posición del recién nacido elevada o rebajada por la presión del aire en el "cojín" inferior
- La facilidad del palpación del recién nacido se ajusta con la presión del aire del "cojín" superior
- El módulo encaja en el modelo S500
- Bolsa de transporte blanda

S500.5



Entrenamiento técnico en suturas posparto

Características

- Un vinilo suave permite el uso de una aguja estándar con sutura de catgut crómico "00" o "000"
- Tres módulos presentan la episiotomía central con desgarros en los labios menores, episiotomía medio-lateral con desgarros periuretrales y episiotomía mediolateral estándar

S500.6

Los módulos pueden comprarse individualmente. Por favor especifique el módulo de sutura necesario



Feto, cordón umbilical y placenta para parto con ventosa obstétrica

Características

- Cráneo suave y liso con fontanelas para parto con ventosa obstétrica realista

S500.1



Módulo de nacimientos

- Seis estaciones de partos seleccionadas para representar condiciones del cérvix y de la vagina antes del parto, durante el parto y en el nacimiento en una mujer primigrávida
- Las estaciones se pueden colocar en el canal de parto del modelo S500
- Las estaciones que se ilustran son:
 - STA -5 previamente al inicio del parto;
 - STA -4 cérvix parcialmente borrado;
 - STA -3 cérvix completamente borrado;
 - STA 0 cabeza del feto en el plano de la espina isquial; STA +2 cérvix cercano a la dilatación completa;
 - STA +5 coronación de la cabeza del feto

Características

- Seis estaciones de parto
- Funda de transporte

S500.4



Mecanismo de parto

Tres piezas

Características

- Placa removible para inserción del mecanismo de parto
- Cérvix removibles que se dilatan automáticamente a medida que el parto progresa
- Avance y rotación del feto por el canal de parto
- Coronación de la cabeza del feto
- Manipulación de la vulva para pasar la frente, nariz y orejas
- Limpie boca y nariz con una jeringa
- Rotación fetal para permitir la presentación de hombros
- Feto de parto
- Dos cérvix dilatables
- Bolsa de transporte blanda
- Manual de instrucciones

S500.10

Patente 6,503,087

Paquete de hemorragia postparto

El módulo S500.8 PPH simula sangrado posparto y les permite a los profesionales de la salud practicar técnicas de masajes del fondo uterino.

Características

- Un cojín de elevación
- 2 cérvix
- Un útero postparto con líneas de aire y fluidos y jeringa de llenado
- Concentrado de sangre simulada
- Reserva de sangre simulada
- Funda de transporte

S500.08